

水産用

動物用一般医療機器

SOCOREX SWISS

ソコレックスSHウルトラ連続注射器

Socorex® ultra 1810 Micro-range tube feeding syringe

水産用ワクチン接種用の連続注射器です。

薬液ボトルと注射器をシリコンチューブで接続します。

希望する容量を設定します。

ピストン動作を繰り返すと定量で連続注射が可能です。



品番	容量	可変容量(ml)	目盛(ml)	重量
1810.2.05003	0.3 ml	0.05 ~ 0.3	0.025	75 g

軽量の注射器 (重さ比較)


クラシック連続注射器と比べても約半分の重量です。



容量	クラシック	ウルトラ	比較
0.3 mlモデル	142 g	75 g	47% 軽量

バルブ部品の交換が容易

- バルブパーツが一体化したカートリッジ構造で、パーツの紛失を大幅に軽減し、素早い交換を実現します。
- カートリッジの形状が異なるので、装着間違いがありません。

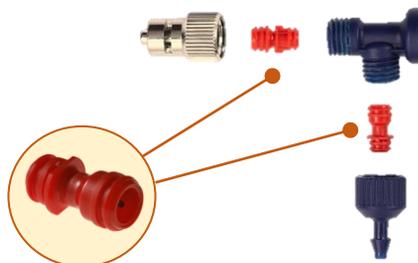

ガラスパレル

肉厚で丈夫な目盛り付ガラスです。耐熱性・耐薬品性に優れています。

品番	容量	入数
01810.003	0.3 ml	6本入



スペアパーツセット


よく使う消耗品/パーツがセットになっています。予備用に常備しておくとお安心です。

【セット内容】 吸引・吐出カートリッジ x 各1個
ワッシャー x 2個、ピストン用Oリング x 2個、工具

品番	容量	入数
1.1810.003	0.3 ml	1 set

フィッシュガイド

針によるけがのリスクを軽減します。ガイドは手で角度を調節することができます。

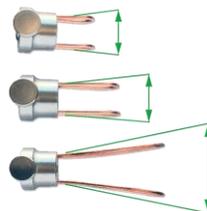

品番	ガイド長
1.1810.015	15 mm
1.1810.025	25 mm
1.1810.045	45 mm

ソコレックス用潤滑剤

鉱物油系潤滑油 (非油性・非毒性) ピストンやガラスパレル内壁に塗布することで保護膜を形成し、過度な摩耗を防ぎ、錆や汚れから保護します。高温環境でも形成した保護膜に影響がありません。(オートクレープ可能)



品番	1.170.705
容量	70 ml

株式会社 伸 和



大阪市北区天神橋2丁目2番8号
TEL: (06)6353-5156
FAX: (06)6353-5128
<https://www.shinwahc.co.jp>

ご用命は下記の取扱店へ